

WOOLWORTH

Wärmeunterdecke TH(150x080)-1XC



Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

ACHTUNG! Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn

- es sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist
- es ein beschädigtes Netzkabel oder Netzstecker hat
- es nass geworden ist
- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an eine Fachkraft (*).

()Fachkraft: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.*

- Sollten Sie Träger eines Herzschrittmachers oder Diabetiker sein, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor Benutzung des Produktes um Erlaubnis.
- Die von dem Produkt ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder liegen unter den staatlich bestimmten Grenzwerten, könnten aber unter Umständen die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht an verletzten, entzündeten oder geschwollenen Körperstellen. Im Zweifelsfall holen Sie vor der Benutzung ärztlichen Rat ein.
- Das Produkt nicht bei Kleinkindern verwenden.

WOOLWORTH®

- Die Wärmeunterdecke nicht bei hilflosen und/oder wärmeunempfindlichen Personen verwenden. Sie könnten sich bei zu langer Benutzung verbrennen.
- Die Wärmeunterdecke darf nicht zum Wärmen von Tieren benutzt werden. Denn sie könnten das Netzkabel oder andere stromführende Teile zerbeißen und einen Stromschlag erleiden.
- Das Produkt muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Produktes übereinstimmen um Überhitzen und Kurzschluss zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Verwenden Sie, falls nötig, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Produktes übereinstimmen.
-
- **Der Netzstecker ist zu ziehen:**
 - wenn die Wärmeunterdecke, Netzkabel oder Bedienteil Schäden aufweisen
 - bei Störung während des Betriebs
 - nach dem Gebrauch
 - vor jeder Reinigung und Pflege

WOOLWORTH®

- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro- Installateur um Rat.
- Ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie das Produkt nicht benutzen und bevor Sie das Produkt reinigen. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen.
- Die Wärmeunterdecke niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken um Schäden am Netzkabel zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Produktes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen kann und dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung und lassen Sie es nicht über den Rand oder Ecken von Möbeln hängen. Es könnte beschädigt werden.
- Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle wie elektrischen Herd, Gasheizung oder Ofen legen.
- **Achtung Verbrennungsgefahr! Bei eingeschalteter Wärmeunterdecke niemals**

WOOLWORTH®

einschlafen. Allzulange Anwendung kann Hautverbrennungen verursachen!

- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es feucht geworden ist. Lassen Sie es komplett trocknen.
- Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände in die Wärmeunterdecke stecken.
- Benutzen Sie die Wärmeunterdecke nicht, wenn es zusammengeschoben oder zusammengefaltet ist. Vermeiden Sie zu starkes Abknicken und Durchbiegen des Produktes um Schaden zu vermeiden.
- Die Wärmeunterdecke darf nur mit dem mitgelieferten Bedienteil betrieben werden. Platzieren Sie das Bedienteil immer so, dass er leicht zugänglich ist.
- Die Wärmeunterdecke ist vor jeder Benutzung dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls Abnutzungen oder Beschädigungen festzustellen sind, darf die Wärmeunterdecke nicht mehr verwendet werden!
- Verwenden Sie die Wärmeunterdecke nur für den Hausgebrauch/Innenbereich.
- Befestigen Sie die Wärmeunterdecke nur mit den vorgesehenen Verschlüssen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne damit es nicht hineinfallen kann.

- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel und verdrehen Sie es nicht, wenn Sie die Wärmeunterdecke benutzen.
- Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Das Produkt darf nicht von/bei Kleinkindern jünger als drei Jahre benutzt werden, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Wählen Sie den Standort Ihres Produktes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Produkt haben. Benutzen und lagern Sie das Produkt nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Aufgrund von Verletzungs- und Erstickungsgefahr, keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.) für Kinder oder Tiere erreichbar liegen lassen.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer- Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

WOOLWORTH®


Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an den Hersteller.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Wärmeunterbett mit Fernbedienung
- 1 Bedienungsanleitung

Detailbeschreibung

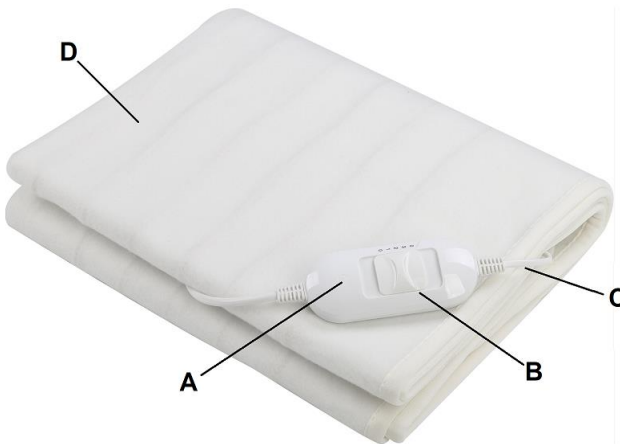

- A: Betriebskontrollleuchte mit Heizstufenanzeige
- B: Bedienelement mit Heizstufenregelung
- C: Anschlusskabel
- D: Wärmeunterdecke

WOOLWORTH®

Inbetriebnahme

Vergewissern Sie sich stets, dass die Wärmeunterdecke (D) nicht geknickt oder gefaltet ist, wenn es in Gebrauch ist. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Fernbedienung (B) mit dem Schiebeschalter (B) für die Temperaturstufen benutzen. Verwenden Sie keinesfalls eine Zeitschaltuhr!

Temperaturstufe **0** = Gerät ausgeschaltet

Temperaturstufe **1** = niedrige Erwärmung

Temperaturstufe **3** = hohe Erwärmung

Auf den Temperaturstufen 1 bis **3** leuchtet die Betriebskontrollleuchte.

Sie können die Anwendung jederzeit abbrechen, indem Sie den Schiebeschalter (B) in Position **0** bringen. Wenn Sie das Wärmeunterbett (D) nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Bei langer Benutzung oder falls Sie einschlafen, wählen Sie bitte die Temperaturstufe „1“ als niedrigste Einstellung, um ein Überhitzen zu vermeiden. Dies könnte sonst unangenehm werden.

WARNUNG

Wenn das Wärmeunterbett in Betrieb ist, kann sich die Fernbedienung leicht erwärmen. Deshalb darf die Fernbedienung nicht abgedeckt oder auf das Wärmeunterbett gelegt werden, solange das Gerät eingeschaltet ist.


Verlassen Sie sich bei einem Wärmetest von dem Wärmeunterbett nicht auf das Gefühl in Ihren Händen. Hände sind wesentlich unempfindlicher gegenüber Hitze als der Rest des Körpers.

Die Betriebskontrollleuchte erlischt, wenn im Fall eines Fehlers das Wärmeunterbett durch das Sicherheitssystem abgeschaltet wird.

Beachten Sie, dass das Wärmeunterbett nicht mehr benutzt werden darf, nachdem ein Fehler aufgetreten ist, der Ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet.

Reinigung

Bevor Sie die Wärmeunterdecke reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät mind. 10 Minuten abkühlen. Die Wärmeunterdecke ist mit einer abnehmbaren Bedieneinheit ausgestattet. Trennen Sie die Bedieneinheit von der Wärmeunterdecke, indem Sie das Verbindungskabel aus dem Stecker an der Wärmeunterdecke ziehen. Das Wärmeunterbett dürfen Sie bei 30° Schonwäsche in der Maschine oder sanft per Handwäsche reinigen. Am besten legen Sie das Wärmeunterbett in eine Badewanne mit handwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel und drücken es sanft aus. Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten. Lassen Sie die Wärmeunterdecke nach der Wäsche ausgebreitet auf einer flachen Unterlage trocknen. Benutzen Sie die Wärmeunterdecke erst wieder, wenn es vollkommen trocken ist. Bewahren Sie die Wärmeunterdecke ausgebreitet liegend ohne zusätzliche Auflagen an einem sauberen und trockenen Platz auf

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

Heizdecke/Koc elektryczny

Modellnr. /Nr modelu: TH(150x080)-1XC 220-240V~ 50Hz 60W

Binden Sie die Heizdecke sicher fest / Koc grzewczy należy bezpiecznie zawiązać.

Verwenden Sie die Heizdecke ausschließlich als Unterdecke / Koca grzewczego należy używać wyłącznie jako koca pod spód.

Nicht in nassem Zustand verwenden / Nie używać, jeśli jest mokry.

Nicht geeignet für hilflose Personen, Kleinkinder oder hitzeunempfindliche Personen / Nie używać u bezradnych osób lub osób niewrażliwych na gorąco.

Nur mit folgendem abnehmbaren Schalter verwenden: TWK-1/T4E / Używać tylko z odłączanym kontrolerem: TWK-1/T4E

Reinigen Sie die Decke gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung / Czyścić koc zgodnie z instrukcją obsługi.

Woolworth GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna
ORD: 330218/00

